

IVISKIN

IVISKIN G2 IPL hårborttagare




Användarmanual

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning

Innehållsförteckning

1. Beskrivning av knappar	S.4
2. Innan du använder enheten	S.5
3. Säkerhetsanvisningar.....	S.5
4. Produkten är inte lämplig för	S.7
5. Var kan enheten användas?.....	S.8
6. Undvik att använda IPL på.....	S.9
7. Det rekommenderas att utföra ett test före användning ...	S.9
8. Hur kommer du igång med IPL hårborttagningsmaskin....	S.9
9. Instruktioner.....	S.11
10. Solexponering under behandling.....	S.12
11. Felsökning.....	S.13

1. Beskrivning av knappar:

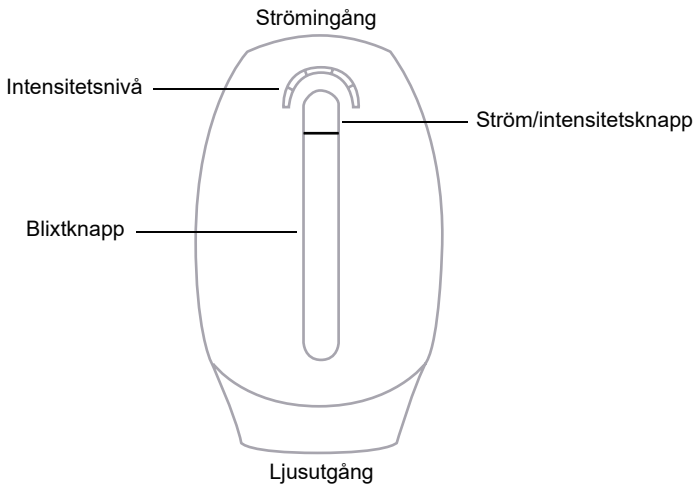

2. Innan du använder enheten:

Kontrollera din hudtyp som du kan hitta på hudfärgskontrollbilden nedan. Använd inte den här enheten om du har mörk hud. Det kan leda till biverkningar i huden, såsom pigmentering och depigmentering, svår rodnad och svullnad eller sveda.



3. Säkerhetsanvisningar:

Dessa säkerhetsanvisningar är allmänna rekommendationer för säker användning av IPL-teknik i hemmet. De är inte unika för vår modell, men är god praxis som bidrar till att ge en säker och effektiv behandling.

- Applicera inte någon kräm eller vårdande produkt före användning, då krämer täpper igen hårsäckarna så att ljuset inte når hela vägen ner, eller skapar en reaktion.
- Får ej användas i badkar, dusch eller i kontakt med vatten.
- Förvara enheten på en torr plats och inte i direkt solljus.
- Om huden på området som ska behandlas inte är torr eller ren kommer det att påverka resultatet, det kan också leda till att produkten inte blinkar eller blinkar oavsiktligt.
- Vi rekommenderar att alla som använder våra IPL-hårborttagare är 18 år eller äldre. Du som är under 18 år måste ha dina föräldrars samtycke.
- Om du är under 18 år och har känslig hud ombes du kontakta läkare för

råd om huruvida du kan använda IPL.

- Kontrollera regelbundet blyxtfönstret för smuts, detta för att undvika brännskador och fel under användning.
- Blockera inte utblåset under användning, eftersom det kan orsaka rök och brand.
- Ställ in styrkenivån enligt din hudtyp. Se punkt 8 om hur du kommer i gång.
- Vid tecken på hudirritation eller rodnad efter behandling, vänta med applicering av produkter på din hud tills symptomen avtar. Om irritation kvarstår efter användning av en produkt, skölj omedelbart med vatten. Vid ihållande symptom, avsluta användningen av produkten och rådgör med vårdpersonal.
- Denna produkt ska endast användas i enlighet med dess avsedda syfte. Följ de allmänna säkerhetsanvisningarna som anges i användarmanualen. Felaktig användning kan resultera i olyckor såsom elektriska stötar, brännskador eller andra liknande skador.
- Att använda intensivt pulserande ljus för hårborttagning kan hos vissa leda till motsatt effekt, nämligen ökad hårväxt. Kvinnor från Medelhavsområdet, Mellanöstern och Sydasiens som behandlas i ansiktet är särskilt utsatta enligt den senaste forskningen. Fenomenet kallas "paradoxal hypertrikos" eller "paradoxal hårväxt" och är sällsynt. Det är viktigt att nämna att personer med mörkare hud kan uppleva andra resultat och potentiella biverkningar än de med ljusare hud, oavsett typ av enhet.
- Hudirritation från aktiviteter som rakning eller annat ska helst läka innan du använder enheten.
- Använd inte brun utan sol eller någon annan form av selftan-kräm under behandling.

- En hudnära rakning före användning är det som rekommenderas allra starkast. Målet är att ljusenergin ska nå hårsäcken så snabbt som möjligt – för att uppnå bästa resultat är det alltså avgörande att du först rakar dig. Du kan vaxa, plocka eller epilera, men då måste du vänta 24 timmar innan du utför en behandling med IPL.
- Detta verktyg är inte avsett att användas av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller kognitiv kapacitet, såvida de inte får handledning av en person med nödvändig erfarenhet.
- Barns interaktion med enheten bör övervakas för att förhindra potentiella risker såsom exponering för ljus, elektrisk fara eller potentiella faromoment knutna till enhetens komponenter.
- För optimalt resultat, håll dig till den föreslagna behandlingsfrekvensen. Överdriven användning tidigt i processen kan öka risken för biverkningar på huden.
- Om du behöver plastikkirurgi efter hårborttagning (gäller endast på området där du har tagit bort hår) måste du först rådfråga din läkare.
- Om du känner dig sjuk eller illamående efter användning, kontakta läkare.
- Vi rekommenderar att du använder de skyddsglasögon som medföljer under behandling.

4. Produkten är inte lämplig för:

- Gravida, ammande, kroppsärr, diabetes, ömtålig hud och ljuskänslig hud.
- Allvarlig hjärtsjukdom, måttlig till svår hypertoni, maligna tumörer, follikulit, smittsam hudsjukdom, bränd hud och koagulationsrubbningsar.
- Använd inte om du har onormal kollagenmetabolism, inklusive en historia av ärrbildning och dålig sårhäkning.

- Patienter med kärlsjukdomar, såsom åderbräck på platsen för bestrålningen.
- Patienter med utbrott av herpes simplex, hudskador eller hematom får inte använda enheten.
- Personer med immunsjukdomar (inklusive HIV, porfyri etc.) får inte använda enheten.
- Alla patienter med en blödningsrubbnig och de som använder isotretinoin, alfahydroxysyra (AHA), salicylsyra (BHA) eller azelainsyra får inte använda enheten.
- Använd denna produkt med försiktighet om du har använt kemisk hårborttagning under de senaste 30 dagarna. Detta gäller även dig som nyligen har använt hudblekningsprodukter eller produkter som innehåller vitamin A.
- Använd inte enheten om du har tagit acetylsalicylsyra, immunsuppressiva läkemedel och andra läkemedel.

5. Var kan enheten användas?

IVISKIN IPL hårborttagningsmaskin kan användas över hela kroppen så länge den är under nästippen! Detta är en rekommendation då vi vill att alla ska vara försiktiga med att inte få IPL direkt i ögonen under behandlingen.

Vad gäller nedtill så kan den användas på kvinnor på brasilianskt vis, men undvik att behandla anus, slemhinnor och inre blygdläppar. Hos män rekommenderar vi att man inte behandlar penis och pung. Områden runt om kan behandlas.

6. Undvik att använda IPL på:

1. Ögongloben, ögonlocken och runt ögonen
2. Slemhinnor och anus
3. Områden med akne
4. Tatueringar
5. Ögonbryn
6. Öron
7. Bröstvårtan, vårtgården
8. Inuti naveln
9. Stora ådror

(Obs: Denna lista är inte uttömmande. Om du inte är säker på om du kan använda denna produkt rekommenderar vi att du konsulterar en läkare).

7. Det rekommenderas att utföra ett test före användning:

Testmetod:

Det rekommenderas att kontrollera biverkningar eller reaktioner genom att utföra ett hudtest 24 timmar före den första behandlingen. Testa på ett litet område av huden på insidan av överarmen en gång med styrka 1 och en gång med styrka 5. Om du märker rodnad, brännskador, stickande smärtor eller andra symtom under de kommande 24 timmarna, kontakta en läkare innan du använder den igen.

8. Så här kommer du igång och använder IPL hårbortagningsmaskin:

Avlägsna först håret från huden genom rakning. Om du vaxar, plockar eller epilerar måste du vänta 24 timmar innan du utför en behandling med IPL. Huden ska vara helt torr och fri från oljor och krämer. Använd endast en ljuspuls per område. Det är inte nödvändigt med flera blink på samma ställe.

1. Anslut nätadaptern. Displayen visar "OFF".
2. Håll inne på-knappen tills displayen aktiveras. Det som visas på displayen ändras. Tryck snabbt på enhetens på-knapp för att öka nivån. 1–2–3–4–5–4–3–2–1.
3. IceShield-funktionen aktiveras inte automatiskt när du startar enheten. (Det är därför du inte ser någon kylsymbol.) Tryck kort på kylknappen för att slå på/av kylning. Kylsymbolen visas på displayen när funktionen är aktiverad.
4. När du har slagit på maskinen, tryck på ljuspulsknappen (medan du håller behandlingshuvudet nära huden) för att gå in i manuellt blixtläge. Håll inne IceShield och autoläge-knappen i 2 sekunder för att aktivera eller inaktivera det automatiska blixtläget. I det automatiska blixtläget så avges ljuspulserna automatiskt (så länge enheten är nära din hud).
5. Efter användning håller du inne på-knappen för att slå av enheten.

Ställ in rätt intensitet:

Nivåskalan sträcker sig från 1 till 5, där 1 är lägst och 5 är högst. När du provar detta för första gången måste du börja på nivå 1. Efterhand som du blir mer van vid processen kan du sakta öka styrkan vecka för vecka, men bara om det inte orsakar smärta under behandlingen.

Vi rekommenderar att du täcker alla områden som du vill behandla genom att placera behandlingsfönstret nära det område du nyss behandlade. Detta för att uppnå bästa resultat.

Personer med mörk hud bör vara försiktiga med IPL-behandling (Intense Pulsed Light); det rekommenderas antingen att undvika användning helt, eller att välja en lägre styrka för att minska risken för biverkningar som hudirritation, rodnad och hyperpigmentering. Om du ser förändringar i hudens färg efter behandling så bör du kontakta din läkare.

9. Instruktioner:

1. Tryck på "strömknappen" i en sekund. Enheten startar och går in i arbetsläge (den gröna indikatorlampan lyser och du kan höra systemet gå igång). Du kommer att se att den röda indikatorlampan lyser efter uppstart.
2. Den rosa lampan på enheten indikerar om det finns hud i närheten eller inte. Om det rosa ljuset är konstant är det inte nära huden – då går det inte att trycka på knappen för att få IPL heller. Om det rosa ljuset är nära huden kommer det att blinka.
3. Klicka på "strömknappen" för att välja lämplig intensitetsnivå. Det finns fem intensitetsnivåer som indikeras av de blå indikatorlamporna. Nivå 1 är lägsta intensitet, nivå 5 är max. Alla justeringar görs med ett klick på strömknappen.
4. När intensitetsnivån är inställd, placera blyxtfönstret mot huden så att hela fönstret är täckt. Du kommer att se den röda indikatorlampan blinka. Klicka sedan på blyxtknappen. Enheten blinkar en gång.

Manuellt läge:

Enheten startar i manuellt läge och du måste trycka kort på blixtnappen för att den ska ge en ljusblxt. Om du behöver byta till glidläge håller du bara ned blixtnappen i 2 sekunder och då kommer det blå ljuset att lysa konstant och blinka.

Glidläge:

För glidläge, tryck ljusfönstret mot huden för att aktivera glidlägesensorn som känner av huden. Håll blixtnappen intryckt i 2 sekunder – sedan börjar den blinka med jämna mellanrum. Blixten slutar när den lämnar huden. För att gå ur glidläge, håll blixtnappen intryckt i 2 sekunder så återgår den till manuellt läge.

Rekommenderad behandling:

IPL används en gång i veckan i 12 veckor. Efter bara 4 veckor kommer du att märka skillnad.

Efter 12 veckor kommer du antingen att vara nöjd med resultatet och gå in i efterbehandlingsfasen, eller fortsätta – detta varierar från person till person. Om du fortsätter behandlingen, gör detta en gång i veckan tills du uppnår önskat resultat.

Efterbehandlingsfasen: Du bibehåller dina resultat genom att använda IPL en gång varannan månad efter avslutad behandling.

10. Solexponering under behandling:

- Vi rekommenderar att du väntar 48 timmar med att sola efter behandling.
- Om du är eller blir solbränd under behandlingsperioden så måste du vänta tills det gått över innan du använder IPL-hårborttagaren. Kom ihåg att alltid skydda din hud med solskyddsmedel! Använd SPF 50 + på områden som har behandlats 48 timmar efter användning, och SPF 30 i minst två veckor efter.
- Undvik att sola i solarium under behandlingsperioden.
- Efter att du solat måste du vänta i två veckor innan du använder Iviskins IPL-hårborttagare. Då ska du också genomföra ett test 24 timmar innan du påbörjar behandlingen. Se punkt 7: "Testa före användning".

Vid kassering av produkten, släng den inte i restavfallet. Lämna den till en miljöstation. Detta är viktigt för miljön och oss.

11. Felsökning:

Det här avsnittet innehåller de vanligaste problemen du kan stöta på när du använder den här enheten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av denna information, kontakta kundservice.

<u>Beskrivning av problemet:</u>	<u>Möjliga orsaker:</u>	<u>Lösningar:</u>
Laddaren eller enheten blir varm under användning.	Det här är normalt.	Du behöver inte göra någonting.

Jag placerar hårborttagare på huden och siffran blinkade men kylfläkten började gå.	Skydd mot överhettning har aktiverats.	Överhettningsskyddet gör att fläkten fortsätter gå. Stäng inte av strömmen. Vänta tills enheten har svalnat i 15 minuter innan du fortsätter användningen.
Enheten blinkar inte när blixtknappen trycks in.	Enheten måste återställas.	Återställ enheten genom att slå av och på strömmen.
Jag kan inte öka eller minska intensitetsnivån.	Enheten måste återställas.	Återställ enheten genom att slå av och på strömmen.
Det luktar illa när jag använder enheten.	Tillbehör och filter är för smutsiga. Vänligen tvätta tillbehören noggrant. Håret från behandlingsstället har inte tagits bort tillräckligt bra. Dessa hårstrån kan bli brända och ge en illaluktande lukt.	Vänligen ta bort håret innan du använder enheten.
Under behandlingen känns huden känsligare än normal/olidlig smärta när jag använder enheten.	Ljusintensiteten är för hög.	Försäkra dig om att du valt korrekt ljusintensitet. Sänk intensitet om nödvändigt.
Under behandlingen känns huden känsligare än normal / Olidlig smärta när jag använder enheten.	Du har inte tagit bort håret från behandlingsstället.	Vänligen ta bort håret på behandlingsstället innan du använder enheten.
	Det ultraviolette filtret är skadat.	Fortsätt inte att använda enheten när UV-filtret är skadat. Kontakta kundservice.

<p>Under behandlingen känns huden känsligare än normal / Olidlig smärta när jag använder enheten.</p>	<p>Du har använt enheten på fel ställe.</p>	<p>Använd inte denna enhet i följande områden: bröstvårtan, värtgården, blygdläpparna, slidan, anus, samt insidan av näsborrarna och öronen. Manliga användare bör inte använda produkten i ansiktet eller pungen.</p>
	<p>Enheten passar inte din hudtyp.</p>	<p>Om din hudtyp är brunsvart eller mycket mörk, använd inte denna enhet.</p>
<p>Hudens reaktion varade längre än vanligt efter behandlingen.</p>	<p>Ljusintensiteten du har valt är för hög.</p>	<p>Välj en lägre ljusstyrka nästa gång.</p>
	<p>Ljusintensiteten du har valt är för låg.</p>	<p>Välj en högre ljusstyrka nästa gång.</p>
	<p>Enheten har ingen effekt på din hårfärg.</p>	<p>Du måste ta bort allt hår. Du bör följa det rekommenderade.</p>
	<p>Din kropps svar på IPL bearbetningen kan vara långsam.</p>	<p>Fortsätt att använda enheten i minst sex månader, eftersom håret kommer att växa tillbaka under denna period, men mängden kommer att minska.</p>

Om du undrar över något annat, kolla in vår blogg på iviskin.se eller FAQ med vanliga frågor som du kan hitta på vår hemsida. Kundtjänst står också redo att svara på alla dina frågor via chatt, telefon eller mejl mellan 09-16 måndag till fredag.

HUR MAN ANVÄNDER IVISKIN IPL-HÅRBORTTAGARE

ME D 6 ENKLA STEG!

1



1. Läs användarmanualen noggrant innan användning.

2



2. Raka behandlingsområdet och torka ordentligt

3



3. Sätt på enheten och välj rätt styrka.

4



4. Placera ljusfönstret helt intill huden och börja behandlingen!

5



5. Låt enheten svalna innan du rengör ljusfönstret med en trasa.

6



6. Applicera rikligt med bodylotion på behandlingsområdet.